

溫馨

用心

創新



# 如何調閱醫療影像資料



# 大綱



---

1

何處可調閱醫療影像資訊？

2

診間電腦環境設備需求

3

醫療影像調閱操作說明文件

4

未來影像查詢擴大方向

# 何處可調閱醫療影像資訊？

進入健保醫療資訊雲端查詢系統 檢查檢驗結果頁籤

檢查檢驗結果  
頁籤

院所影像查詢  
點選此欄

雲端藥歷 檢查檢驗紀錄 **檢查檢驗結果** 手術明細記錄 牙科處置及手術 過敏藥 特定凝血因子用藥 出院病歷摘要 復健醫療 中醫用藥

檢查檢驗類別: 特殊造影檢查 | 特殊檢查檢驗分類項目: 全部 | 檢查檢驗項目: 全部

醫令名稱: 全部 | 就醫區間: 全部 | 來源: 本院 他院 藥局

CT/MRI/PET專區 | DM/血脂專區 | 慢性腎臟病專區 | 腫瘤標記專區

顯示欄位設定 查詢 清除

來源	就醫科別	主診斷	檢查檢驗類別	醫令名稱	檢查檢驗項目	檢查檢驗結果/ 報告結果/ 病理發現及診斷	參考值	報告日期	醫令代碼	有無TAF認證	院所上傳影像查詢
臺北虛癆診門診 3501200000			特殊造影檢查	磁共振造影 - 有造影劑 (Magnetic resonance imaging-with contrast)		Pre & post-contrast MRI of the brain shows: * T1 low, T2 hyperintense signal change at rt. temporal lobe. * Absent of previously noted multiseptated masses. * Pituitary gland is not deformed. * No abnormal signal change visualized at DW images. * No abnormal contrast enhancement after GD-DTPA. * Intact gray-white matter differentiation. * Ventricles are not dilated. * No mass effect or midline shift. * Pituitary gland is not enlarged. * Midline pituitary stalk. * No aneurysmal dilatation or vascular narrowing visualized at MR angiography. * Mucosal thickening at rt. maxillary & ethmoid sinuses. * Both middle ear & mastoids are well aerated. * No definite abnormality at both orbits. IMP: Encephalomalacia, rt. Chronic paranasal sinusitis, rt. 報告醫師: 黃華忠 放診專字第 274 號	10 6/0 9/2 6	33 08 5B			MRI
臺北虛癆診門診 3501200000		聲帶組織炎	特殊造影檢查	電腦斷層造影 - 有/無造影劑 (computed tomography (C.T.)-with/without contrast)		年齡: 44 醫囑醫師: 1890 賴明宏 TONGUE CA WITH NECK METS, R/O DEEP NECK INFECTION Imaging findings : CT of neck with & without contrast enhancement showed: -Hx:tongue cancer s/p op; post-op change of right oral cavity. -s/p tracheostomy. -Soft tissue density presumably nodal metastasis obscuring normal fat-tissue plane at bilateral lower neck with airway deviation to the left. Several low density changes with fat infiltrations also noted. Superimposed with neck infection (abscess formation) is compatible. -Prominent right nasopharyngeal mucosa. -A nodular like consolidation(1.35cm)in left lung apex with focal infiltration. Suggest regular F/U. Impression : 1.Nodal metastasis at bilateral lower neck with neck infection(abscess formation). 2.A nodular like consolidation(1.35cm)in left lung apex. Suggest regular F/U. 黃敬雯醫師 (放診專醫字第 0833 號)		33 07 2B			CT

# 醫療影像呈現畫面

CHUANG, PI YEN, - Uni X +

192.168.74.136/ZFP?mode=Inbound&lights=on#view

CHUANG, PI YEN, 病歷號:0128565 ACC:40170626123 出生日期:14-Nov-1965 年齡:51y 日期:26-Jun-2017 17:17 ipli9mgr

檢查

醫療儀器: 全


2017

10 Jul MR TPEA  
L-SPINE

26 Jun DX TPEA

影像群

DX Se:1  
LATERAL EXT

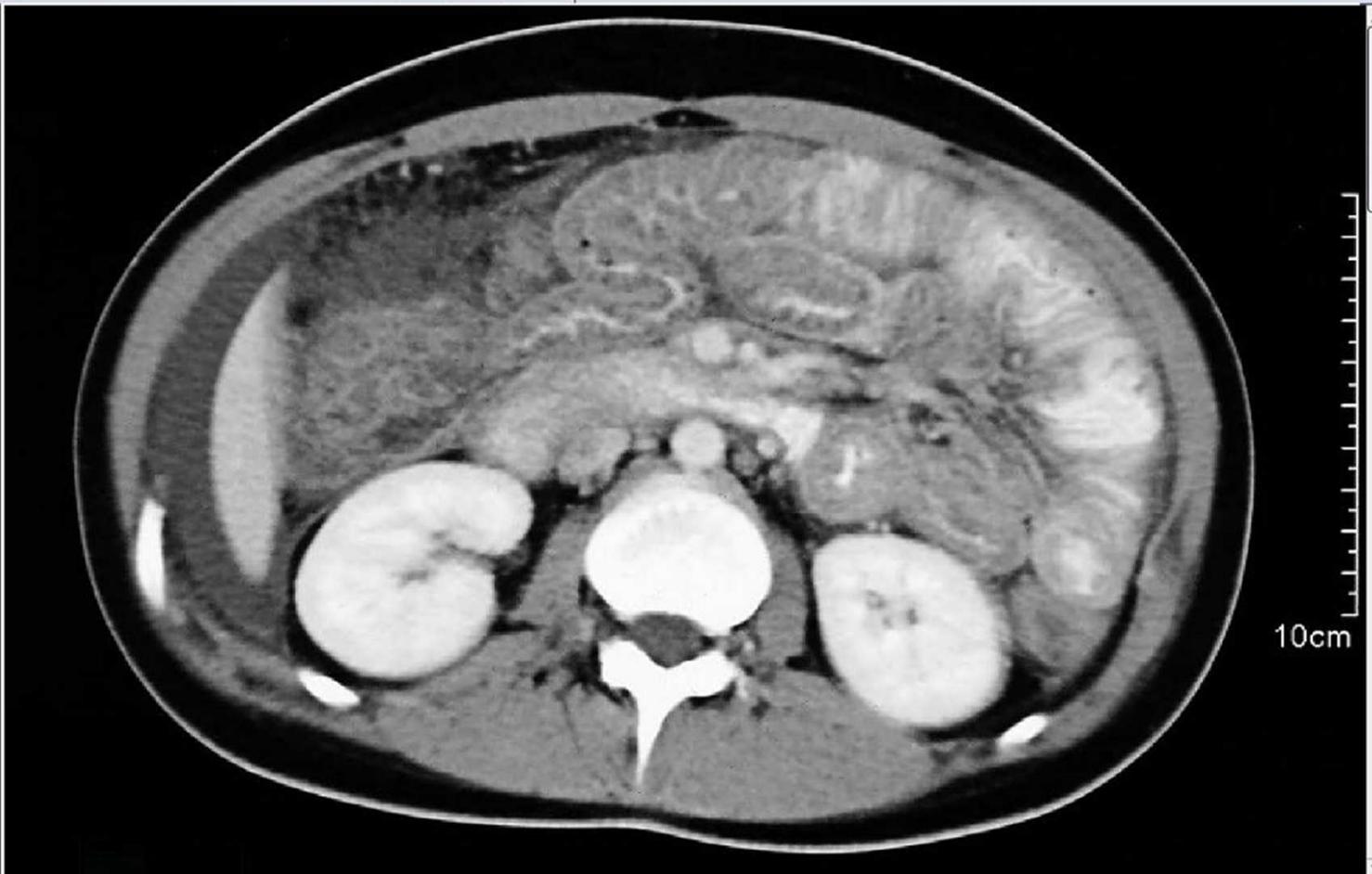

10cm

The image displays a medical software interface for viewing a CT scan. The main window shows an axial CT scan of the abdomen, highlighting the kidneys and the lumbar spine. The interface includes a browser address bar, a patient information header, a toolbar with various viewing tools, and a sidebar with a list of exams and image groups. A 10cm scale bar is visible on the right side of the scan image.

# 診間電腦環境設備需求

## 醫學影像瀏覽器客戶使用端環境規格

	最低要求	建議要求
作業系統	Windows XP	Windows 7 or 10
記憶體(Ram)	3GB以上	6GB以上
中央處理器 (CPU)	雙核心(Intel i3 , 2 GHz以上)	四核心(Intel i5 , 2.7 GHz以上)
顯示卡	內建顯示卡	獨立顯示卡(16MB記憶體)
硬碟	500GB以上	500GB以上
螢幕 解析度要求	1024*768解析度 1024灰階，對比850:1 32 bit color depth 最少 70Hz refresh rate	1920 X 1080 解析度. 1024灰階，對比850:1 32 bit color depth 最少 70Hz refresh rate
瀏覽器	<b>IE7.8.9(需要另外裝元件)</b>	<b>Internet Explorer® 10 以上 (不需另外裝元件)</b>

本醫學影像瀏覽器採用 GE Universal Viewer Zero footprint client

# 如何確認電腦IE版本？ (1/2)

## 確認IE版本

步驟1: 打開IE瀏覽器/說明/關於Internet Explorer



# 如何確認電腦IE版本？ (2/2)

## 確認IE版本

步驟2: 查看版本號(在此為IE11)



# IE7、IE8、IE9需另外安裝元件(1/2)

## 程式執行環境安裝元件說明

### ➤ 前提

- IE10、IE11以上版本，不需另外安裝元件！

- IE7、IE8、IE9需另外安裝ZEP！

LegacyBrowserComponent.msi，需要管理者權限才能執行

### ➤ 如何安裝元件？

- 安裝方式有二種：IE畫面自動安裝或自行下載元件

自動安裝-沒有安裝元件，IE將出現以下畫面

您目前的瀏覽器版本不受支援，無法與 Universal Viewer ZFP 一起使用。

- 請下載並安裝下列舊版瀏覽器元件的先決條件，並重新執行安裝程式。

[.Net Framework 4.0 Client Profile 安裝程式](#)

- 請下載並安裝舊版瀏覽器元件

[舊版瀏覽器元件安裝程式](#)

如果遭遇困難，請聯絡系統管理員。

# IE7、IE8、IE9需另外安裝元件(2/2)

## 於VPN自行下載元件

VPN首頁/常用服務/下載專區/服務項目：健保醫療資訊雲端查詢系統/健保醫療資訊雲端查詢系統影像調閱元件(IE9以下使用)

The screenshot shows the '下載專區' (Download Area) of the VPN service portal. The interface includes a sidebar with navigation buttons and a main content area with a search bar and a table of downloadable files.

**1** 下載專區

**2** 服務項目：健保醫療資訊雲端查詢系統

**3** 健保醫療資訊雲端查詢系統影像調閱元件(IE9以下使用)

檔案說明	檔案	更新日期
健保醫療資訊雲端查詢系統使用者手冊	<a href="#">UserGuide_IMM_NEW_V2.4.pdf</a>	107/01/02
健保雲端藥歷系統查詢報表指標使用者手冊	<a href="#">UserGuide_IMM_RPT(VPN).pdf</a> <a href="#">UserGuide_IMM_RPT(VPN).doc</a>	103/07/14
健保醫療資訊雲端查詢系統影像調閱操作說明	<a href="#">IMM_UserGuide_DICOM_V1.2.pdf</a>	107/01/18
健保醫療資訊雲端查詢系統影像調閱元件(IE9以下使用)	<a href="#">LegacyBrowserComponent.msi</a>	106/12/28


# 醫療影像調閱操作說明文件

VPN首頁/常用服務/下載專區/服務項目：健保醫療資訊雲端查詢系統/健保醫療資訊雲端查詢系統影像調閱操作說明

The screenshot shows a web interface with a sidebar on the left and a main content area on the right. The sidebar contains several menu items, with '下載專區' (Download Area) highlighted by a red box and the number 1. The main content area has a '下載專區' header and a search bar. The search bar has '服務項目：健保醫療資訊雲端查詢系統' selected in a dropdown menu, highlighted by a red box and the number 2. Below the search bar is a table with columns '檔案說明', '檔案', and '更新日期'. The table lists several files, with the file '健保醫療資訊雲端查詢系統影像調閱操作說明' highlighted by a red box and the number 3.

檔案說明	檔案	更新日期
健保醫療資訊雲端查詢系統使用者手冊	<a href="#">UserGuide IMM NEW V 2.4.pdf</a>	107/01/02
健保雲端藥歷系統查詢報表指標使用者手冊	<a href="#">UserGuide IMM RPT(VP N).pdf</a> <a href="#">UserGuide IMM RPT(VP N).doc</a>	103/07/14
健保醫療資訊雲端查詢系統影像調閱操作說明	<a href="#">IMM_UserGuide_DICOM_V 1.2.pdf</a>	107/01/18
健保醫療資訊雲端查詢系統影像調閱元件(IE9以下使用)	<a href="#">LegacyBrowserComponen t.msi</a>	106/12/28

# 107年影像查詢擴大方向

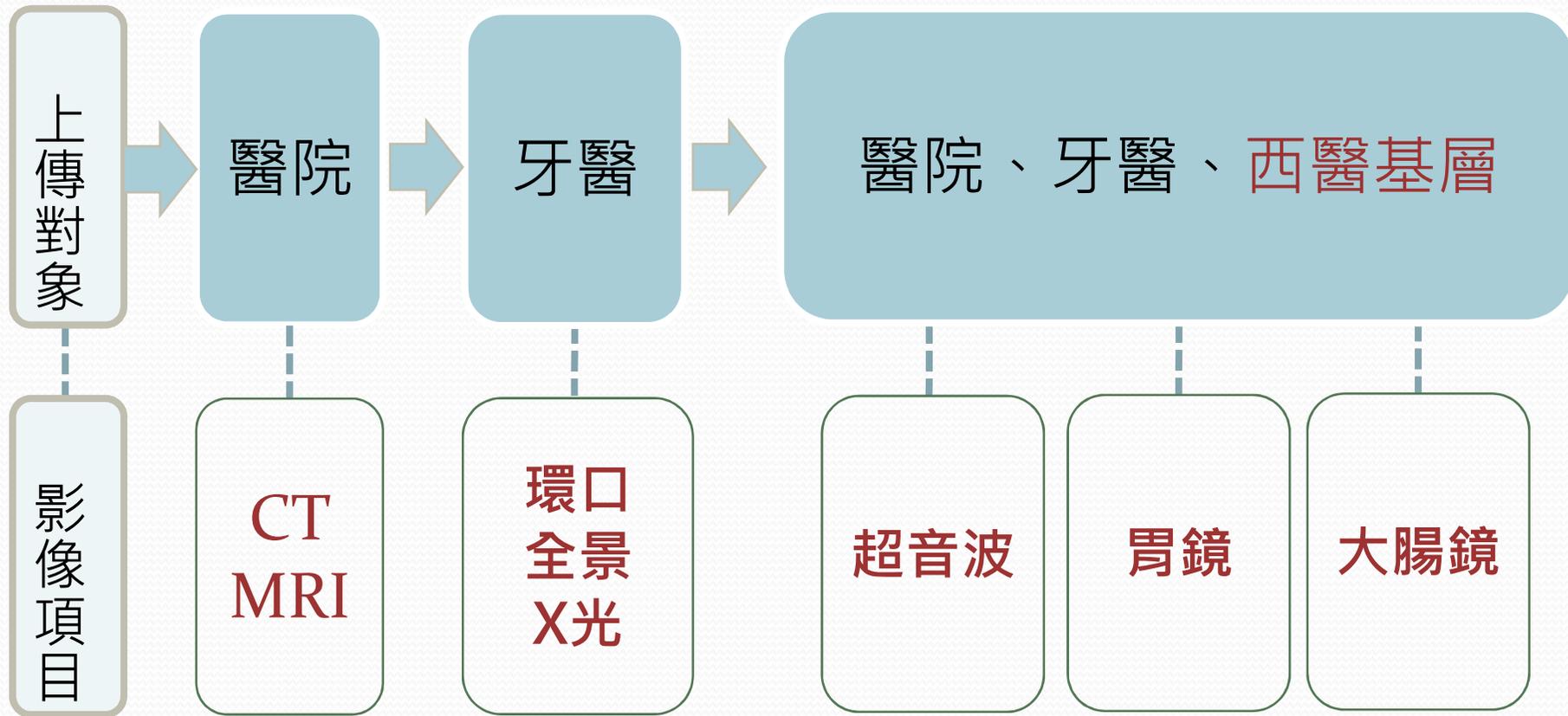

診間互享影像資訊  
開啟健保分級醫療新紀元



*Thank  
You*